

Free of
Parabens!

Prefert[®]

Vaginal Gel

Lubricant when trying to conceive

Vaginal Gleitmittel bei Kinderwunsch

Vaginaal glijmiddel bij kinderwens

Lubrifiant vaginal pour désir d'enfants

Lubricante vaginal al intentar

la concepción

Lubrificante vaginale ideale quando

si desidera il concepimento

Lubrificante vaginal para os casos

em que se deseja ter filhos

Κολπικό λιπαντικό για ζευγάρια με

επιθυμία τεκνοποίησης

Vaginalt glidemiddel ved ønske

om graviditet

Vaginalt glidmedel vid önskan att bli gravid

Vaginalt glidemiddel ved ønske om barn

Liukuvoide raskautta suunnitteleville

Dopochwowy żel nawilżający dla

par starających się o dziecko

Vytváří příznivé prostředí pro spermie

Vaginalni lubrikant ob želji po potroku

Vaginálny lubrikant pri želaní otehotniť

Çocuk isteyen çiftler için vaginal

kayganlaştırıcı

مزلق مهبلي عند الرغبة في إنجاب أطفال




MEDintim


personal healthcare

Quick start to use Prefert®:


1.

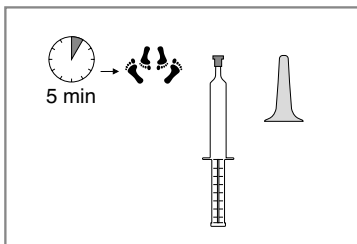


2.

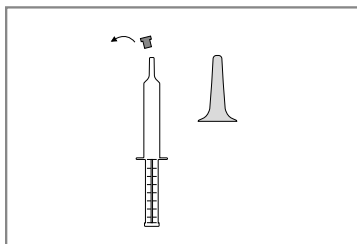

3.

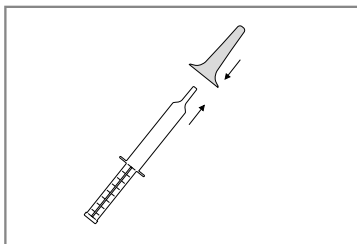

4.

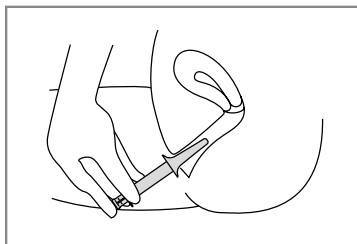

5.



Nederlands

Gebruiksaanwijzing

Prefert®

Vaginale gel

Vaginaal glijmiddel bij kinderwens

Werking

Prefert® bevordert de sperma activiteit op het moment van de ovulatie:

- geeft het sperma een optimale omgeving
- ideale pH-waarde voor natuurlijke bevruchting
- verbetert de beweeglijkheid van het sperma vergeleken met klassieke glijmiddelen
- vermindert de osmotische barrière voor het sperma

cyclusdagen



- verbetert de osmolaliteit
- klinisch getest in Duitsland

Gebruik

Op de 3 vruchtbaarste dagen van de vrouwelijke cyclus (tijdstip van de ovulatie).

Gebruik

Inbrengen voorafgaand aan de geslachtsgemeenschap.

1. Neem voor de geslachtsgemeenschap een wegwerp spuit met Prefert® vaginale gel en de herbruikbare applicator uit de verpakking.
2. Verwijder het grijze afsluitkapje van de spuit.
3. Plaats de vaginale applicator op de spuit. Breng de applicator in de vagina aan.

4. Druk op de zuiger van de spuit om de gel vaginaal aan te brengen. Verwijder de spuit met de applicator weer.
5. Spoel de applicator uit en bewaar deze voor de volgende toepassing.
6. Nu kunt u geslachtsgemeenschap met elkaar hebben. De inhoud van de verpakking is voldoende voor 4 toepassingen.

Na gebruik de lege spuit met het huishoudelijk afval weggooien.

De vaginale applicator met warm water reinigen en uitspoelen. Herbruikbaar.

Klinisch getest in Duitsland.

Français

Mode d'emploi

Prefert®

Gel vaginal

Lubrifiant vaginal pour désir d'enfants

Mode d'action

Prefert® favorise l'activité des spermatozoïdes au moment de l'ovulation :

- apporte aux spermatozoïdes un environnement optimal
- pH idéal pour la fécondation naturelle
- améliore la mobilité des spermatozoïdes en comparaison avec les lubrifiants classiques
- réduit la barrière osmotique pour les spermatozoïdes

Jours du cycle



- améliore l'osmolarité
- cliniquement testé en Allemagne

Moment de l'application

Aux 3 jours les plus féconds du cycle féminin (moment de l'ovulation).

Application

Introduire avant le rapport sexuel.

1. Avant le rapport sexuel, prendre une seringue à usage unique de Prefert® Vaginal Gel et l'applicateur réutilisable.
2. Enlever le capuchon gris de la seringue.
3. Placer l'applicateur sur la seringue. Introduire l'applicateur vaginal dans le vagin.
4. Pousser Prefert® Vaginal Gel dans le vagin en appuyant sur

le piston de la seringue. Enlever de nouveau la seringue avec l'applicateur.

5. Rincer l'applicateur et le conserver pour la prochaine application.
6. Vous êtes maintenant prête pour le rapport sexuel. Le contenu de l'emballage est prévu pour 4 applications.

Après utilisation, jeter la seringue vide avec les ordures ménagères.

Laver et rincer l'applicateur vaginal à l'eau chaude. Réutilisable.

Cliniquement testé en Allemagne.



4. ادفعي بريفيتر ,,الهلام المهبلي" الى المهبل من خلال الضغط على مدقة الحقنة. ثم ابعدي الحقنة مع المطباق.
5. اغسلي المطباق و احفظيه للاستخدام التالي.
6. والان بإمكانكم ممارسة الجماع. محتوى العبوة يكفي لـ 4 استعمالات.

يمكنك التخلص من الحقنة الفارغة بعد الاستخدام مع النفايات المنزلية. تنظيف وشطف المطباق المهبلي بالماء الساخن واستخدامه من جديد.

تم اختياره سريريا في ألمانيا

- يحسن الأسمولية

- تم اختياره سريريا في ألمانيا

وقت الاستعمال

في الأيام الثلاثة الأكثر خصوبة من الدورة الشهرية (موعد الإباضة).

الاستعمال

يتم إدخاله إلى المهبل قبل عملية الجماع.

1. قبل عملية الجماع خذي حقنة بريفيتر ,,الهلام المهبلي" استعمال مرة واحدة والمطابق ذو الاستخدامات المتكررة.
2. أزيل الغطاء الرمادي عن الحقنة.
3. أوخزي المطباق على الحقنة. ادخلي المطباق المهبلي في المهبل.

Prefert®

هلام مهبلي

مادة مزلفة مهبلية تستعمل عند الرغبة في إنجاب الأطفال

طريقة التأثير

يشجع بريفيتر نشاط النطاف في وقت الإباضة:

- يوفر بيئة مثالية للنطاف

- رقم هيدروجيني مثالي للإخصاب الطبيعي

- يحسن حركة النطاف بالمقارنة مع المواد

المزلفة التقليدية

- يقلل الحاجز التناسحي للحيوانات المنوية

Türkçe

Kullanım talimatı



Prefert®

Vajinal jel

Çocuk isteyen çiftler için vajinal kayganlaştırıcı

Etki şekli

Prefert® ovülasyon sırasında sperm aktivitesini artırır:

- Sperm için optimal bir ortam sağlar
- Doğal konsepsiyon için ideal pH
- Klasik kayganlaştırıcılara nazaran sperm hareketliliğini artırır
- Sperm için osmotik bariyeri zayıflatır
- Osmolariteyi artırır
- Almanya'da klinik olarak test edilmiştir

Kullanma zamanı

Kadının adet döngüsünde en fertil olduğu 3 gün (ovülasyon zamanı).

Uygulama

İlişkiden önce uygulayın.

1. İlişkiden önce tek kullanımlık bir Prefert® Vajinal Jel şırıngasını ve tekrar kullanılabilen aplikatörü çıkartın.
2. Şırınganın gri renkli başlığını çıkarın.
3. Aplikatörü şırıngaya takın. Vajinal aplikatörü, vajinaya yerleştirin.
4. Prefert® Vajinal Jeli vajinaya sıkamak için şırınganın pistonuna bastırın. Aplikatörle birlikte şırıngayı çıkartın.
5. Aplikatörü durulayın ve sonraki uygulama için saklayın.

6. Artık ilişki başlayabilir. Ambalajın içeriği 4 uygulama içindir.

Kullandıktan sonra boş şırıngayı çöpe atın.

Vajinal aplikatörü ılık su ile temizleyin ve durulayın. Tekrar kullanılabilir.

Almanya'da klinik olarak test edilmiştir.